


Appareil de massage, étanche

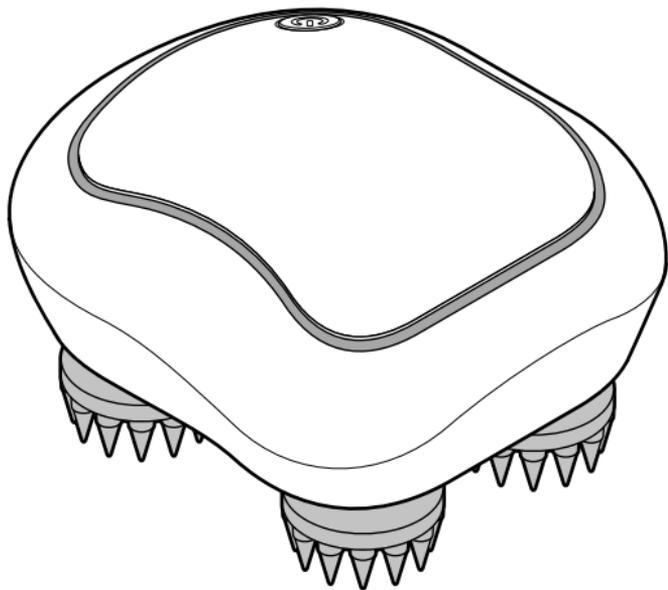

fr Mode d'emploi

118357AB1X1XII · 2021-08

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil de massage vous libérera des tensions ressenties au niveau de la tête, de la nuque et du corps. Grâce aux différentes têtes de massage et aux vitesses variables, vous adapterez le massage à vos besoins tous personnels pour un effet de détente maximum. L'appareil de massage est conçu pour être utilisé sous la douche ou dans la baignoire.

Sommaire

- 2 À propos de ce mode d'emploi
- 3 Consignes de sécurité
- 7 Vue générale (contenu de la livraison)
- 8 Charger la batterie
- 9 Utilisation
- 10 Nettoyage et désinfection
- 11 Élimination
- 12 Caractéristiques techniques

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour un automassage permettant d'accroître la sensation de bien-être.
- Cet article est conçu pour être utilisé sous la douche ou dans la baignoire (indice de protection IPX7 - protégé contre les effets de l'immersion temporaire dans l'eau).
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans les cliniques, les cabinets de massage, les centres de remise en forme, etc. L'appareil de massage n'est pas un dispositif médical et ne sert pas au traitement de la douleur. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.
- Utilisez l'appareil uniquement...
 - ... pour une utilisation externe sur le corps;
 - ... conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, le manque d'expérience et de connaissances les rendent inaptes à l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Afin d'éviter les effets négatifs sur la santé, il est formellement déconseillé d'utiliser l'appareil dans les cas suivants:**
- N'utilisez pas l'appareil de massage ...
 - ... pendant la grossesse;
 - ... en cas de modifications pathologiques ou de blessures dans la zone que vous souhaitez masser (p. ex.

- contusion, inflammation, plaie ouverte, hernie discale, etc.);
- ... après la prise de substances limitant les capacités cognitives (p. ex. analgésiques, alcool);
- ... sur les yeux ou près des yeux, sur le larynx, sur les os ou les articulations, au niveau des parties génitales ou des reins ou d'autres parties sensibles du corps;
- ... pour les animaux;
- ... quand vous êtes au lit;
- ... si l'appareil présente une détérioration.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, surtout...
 - ... si vous souffrez d'une maladie grave ou avez été opéré;
 - ... en cas de port d'un stimulateur cardiaque, d'implants ou d'autres dispositifs;
 - ... en cas de thrombose;
 - ... en cas de diabète;

... en cas de douleurs d'origine inconnue.

- Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 20 minutes; sinon, le massage peut entraîner une stimulation excessive des muscles et, dans certains cas, occasionner des contractures au lieu de vous détendre.
- Si vous ressentez des douleurs ou constatez une éruption cutanée pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le massage et n'utilisez plus l'appareil.

Respectez les conseils suivants pour une utilisation sans risques:

- En cas de dysfonctionnement ou de détérioration, faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.
- Ne laissez jamais l'appareil trop longtemps au même endroit. Déplacez l'appareil de massage en décrivant des mouvements circulaires.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est mis sous tension.

DANGER: risque électrique

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non

appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

L'appareil de massage lui-même est protégé contre l'intrusion d'eau, mais pas la station de charge.

Avant de recharger l'appareil de massage, prenez les précautions suivantes:

- Ne plongez jamais la station de charge dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique. Ne touchez pas la station de charge avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne pas recharger l'appareil à proximité d'eau. Ne placez l'appareil de massage dans la station de charge que lorsqu'il est sec. Il y a sinon risque de choc électrique.
- Si la station de charge tombe dans l'eau pendant le chargement, ne la touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher complètement l'appareil, le câble de recharge micro-USB et l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier de nouveau.

- N'utilisez qu'un adaptateur secteur USB adapté (voir «Caractéristiques techniques»). Ne branchez la station de charge qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement ou dès que l'appareil est entièrement rechargé. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou la station de charge présentent des détériorations visibles ou s'ils sont tombés.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- L'appareil de massage contient une batterie lithium-ion. Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque

d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.


- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries (piles rechargeables).
- Pour recharger l'article, utilisez uniquement la station de recharge d'origine.

PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.


Vue générale (contenu de la livraison)

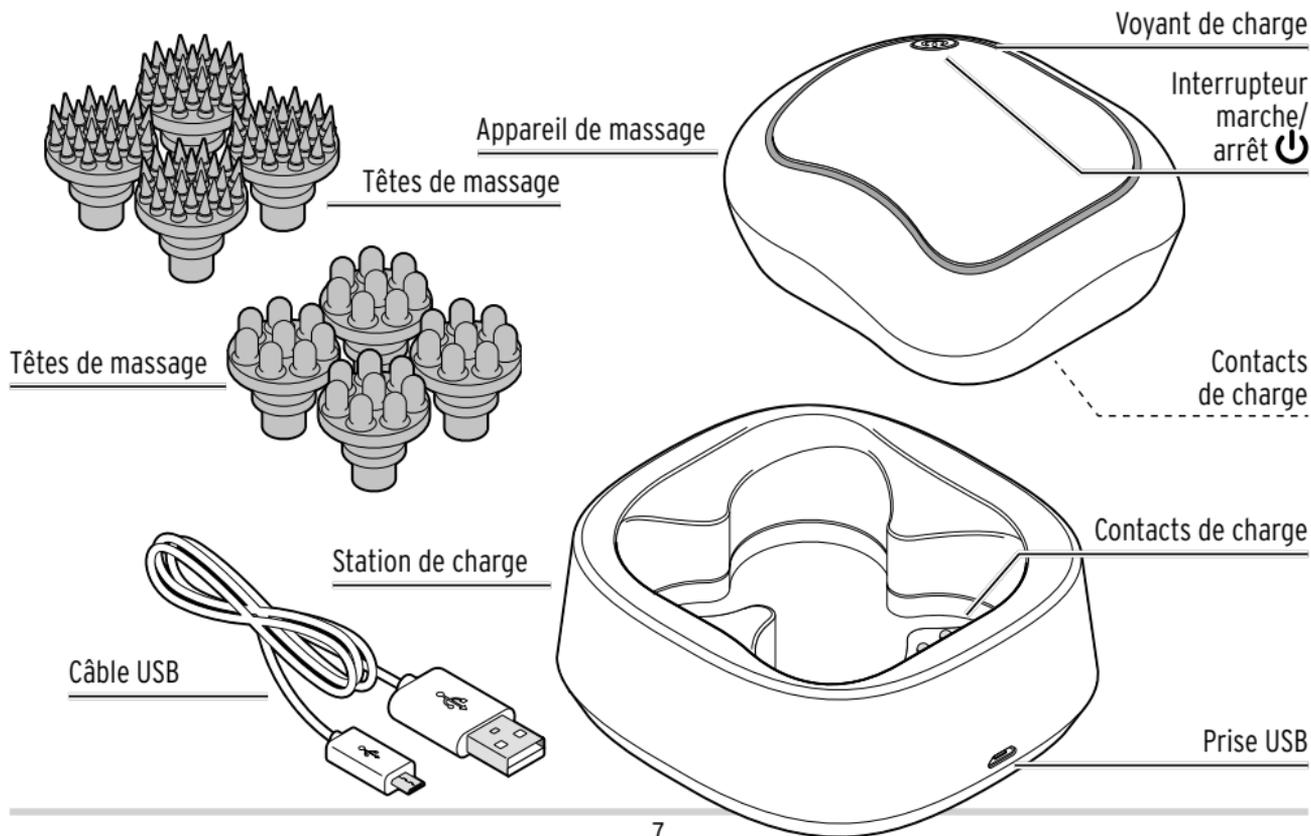

Charger la batterie

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB (non fourni).

1. Placez l'appareil de massage dans la station de charge. Les contacts de charge de l'appareil de massage doivent reposer sur les contacts de charge de la station de charge.
2. Raccordez la station de charge au secteur.

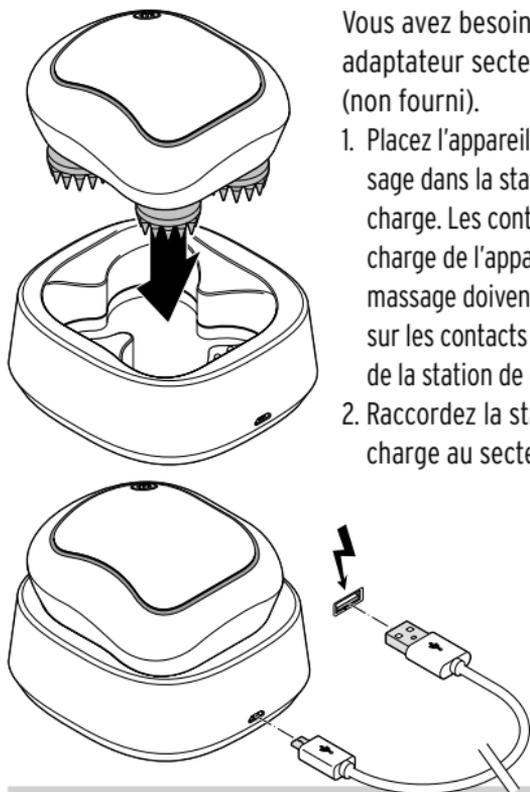

Les voyants clignotent pendant le chargement.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, les voyants s'allument en permanence.

Durée de charge de la batterie vide: env. 2 - 3 h

Autonomie (avec la batterie complètement chargée): env. 1,5 h



La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie.

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois.

Utilisation


Allumer/éteindre

1. Enlevez l'appareil de massage de la station de charge.
Les voyants s'éteignent.
 2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt .
 - L'appareil démarre toujours à la vitesse la plus lente, les voyants sont allumés.
 3. Pour modifier la vitesse, appuyez à chaque fois brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt  ...
La vitesse passe dans l'ordre suivant de ...
... lente (voyant clignote 1x) à
... moyenne (voyant clignote 2x) à
... rapide (voyant clignote 3x),
et ainsi de suite.
- ▷ Pour éteindre l'appareil de massage, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ.



4. Posez l'appareil de massage sur la partie du corps à masser. Exercez sur la peau une pression légère puis au contraire plus forte avec l'appareil afin de varier l'intensité du massage.

Changer les têtes de massage

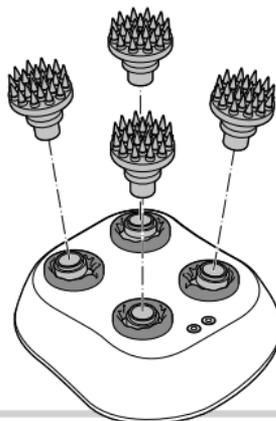

- ▷ Toutes les têtes de massage se changent facilement en les tirant vers le haut. Ensuite, enfoncez la tête de massage désirée.

Nettoyage et désinfection

PRUDENCE: risque de détérioration

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. N'utilisez pas non plus de désinfectant d'usage courant.

- ▷ Vous pouvez également rincer l'appareil de massage, tête de massage en place, sous un filet d'eau.
- ▷ Les têtes de massages peuvent être nettoyées à l'eau chaude en utilisant un détergent d'usage courant.
- ▷ Si nécessaire, essuyez la station de charge avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
- ▷ Pour désinfecter les têtes de massage, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement imbibé d'alcool éthylique.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et les batteries (piles rechargeables) usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle:	622 403
Batterie:	lithium-ion (test selon UN 38.3) 3,7 V  1200 mAh énergie nominale: 5 Wh (le symbole  signifie courant continu)
Entrée USB:	5 V  1 A
Durée de charge:	env. 2 - 3 h
Autonomie:	env. 90 minutes (avec une batterie complètement chargée)
Classe de protection:	III 
Puissance:	5 W
Indice de protection:	IPX7 (protection contre les effets de l'immersion temporaire dans l'eau)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Fabriqué par:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth, The Netherlands (Pays-Bas)



Référence: 622 403