

Appareil de massage des pieds



Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil de massage des pieds renferme des têtes de massage rotatives et des chambres à air comprimé qui reproduisent les mouvements de pression et de pétrissage effectués dans la réflexologie plantaire.

L'appareil de massage des pieds peut aider à ...

- ... stimuler la circulation sanguine des pieds,
- ... encourager la régénération des cellules,
- ... revitaliser et dynamiser les pieds,
- ... soulager les tensions.

Le présent mode d'emploi vous explique comment utiliser l'appareil de massage des pieds en toute sécurité et dans les règles de l'art. Notez qu'un massage effectué de manière incorrecte ou pendant trop longtemps peut créer des tensions au lieu de les soulager.

Sommaire

3	À propos de ce mode d'emploi	9	Changer la pile
3	Consignes de sécurité	10	Nettoyage et rangement
6	Vue générale (contenu de la livraison)	11	Problèmes / solutions
8	Mise en service	11	Caractéristiques techniques
8	Utilisation	12	Élimination
8	Allumer et éteindre		
8	Régler la minuterie		
9	Régler la vitesse du massage de pieds		
9	Régler la pression de l'air comprimé		
9	Allumer et éteindre la fonction chauffante		
9	Utilisation de la télécommande		

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre les risques imminents de blessures graves ou un danger de mort.

REMARQUE vous met en garde contre les risques de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'appareil de massage des pieds est conçu pour masser et détendre les pieds. Il permet de stimuler la circulation sanguine des pieds et de soulager les éventuelles tensions.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial, médical ou thérapeutique.



L'article est destiné à une utilisation à l'intérieur et dans des locaux secs.

Ne l'utilisez pas dans une salle de bain ou dans un sauna, p. ex., afin de ne prendre aucun risque.

L'article ne doit pas être utilisé sur les animaux.

N'utilisez pas l'appareil...

- ... en cas de maladie ou de blessure des pieds (p. ex. plaies ouvertes, verrues, mycoses, éruption cutanée, pieds gonflés ou enflammés),
- ... en cas de douleurs aux jambes ou aux pieds (p. ex. phlébites, varices),
- ... en cas d'hypertension ou de tension anormale, d'ostéoporose, de diabète ou de thrombose,

...si vous souffrez d'une maladie grave ou avez été opéré du pied,

... si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre dispositif similaire,

... si vous avez une maladie cardiaque ou une tumeur maligne,

... si vous souffrez de problèmes de circulation sanguine ou de troubles neurologiques,

... si vous ne vous sentez pas bien,

... en cas de douleurs d'origine inconnue,

... sur des personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur.

Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur.

Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température.

Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.

... sur des enfants de moins de 3 ans,
les personnes dépendantes, les malades
ou les personnes insensibles à la chaleur.

En cas de doute, consultez votre médecin avant
d'utiliser l'appareil!

**Danger: risque pour les enfants
et les personnes à aptitude réduite
à l'emploi d'appareils**

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.
La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ...
... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ...
... ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, à condition qu'ils
...soient sous surveillance ou
... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
... comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'article ainsi que le bloc-secteur et le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides.
- Ne branchez le bloc-secteur qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques». La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant, ...
... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
... après l'utilisation,
... en cas d'orage et
... avant de nettoyer l'appareil.
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous ne devez ni le réparer, ni le remplacer vous-même. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque inutile.
- Cet article ne doit être utilisé qu'avec le bloc-secteur fourni.

- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil
- Avant chaque utilisation, inspectez l'appareil pour vérifier si les deux doublures situées dans les logements des pieds ne présentent pas de signes d'usure ou de détérioration. Si c'est le cas, l'appareil de massage des pieds ne doit plus être utilisé.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie/d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, pour mettre les piles en place, respectez impérativement la bonne polarité (+/-).
Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Ne recouvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement (p. ex. avec une couverture ou une serviette).
- N'utilisez pas l'appareil près de substances facilement inflammables comme l'essence, par exemple.

Avertissement: risque de blessure

- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.


Risque de détérioration

- N'utilisez l'appareil qu'en position assise.
Ne vous mettez pas debout une fois que vous avez introduit les pieds dans l'appareil.
- L'appareil est conçu pour une durée de fonctionnement maximum de 30 minutes. Une fois ce temps écoulé, laissez-le refroidir au moins 30 minutes à température ambiante avant de le réutiliser.
- Protégez les piles ou batteries (piles rechargeables) de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps.
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les supports, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.


Vue générale (contenu de la livraison)

Panneau de commande


Appareil de massage des pieds

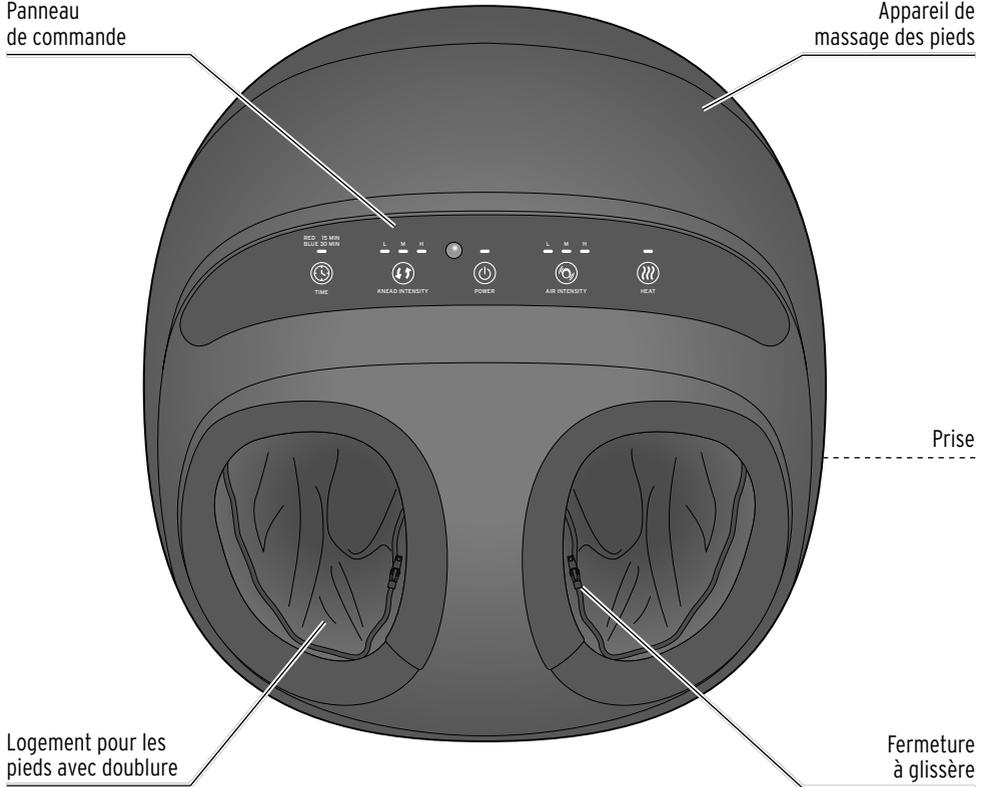


Bloc-secteur

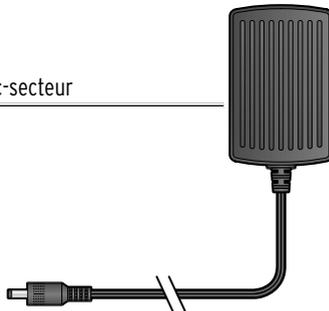

Télécommande

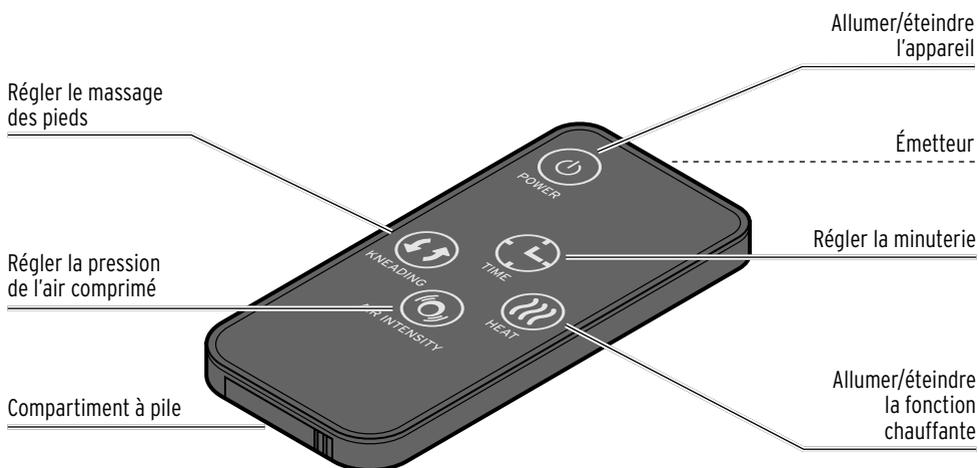

Panneau de commande

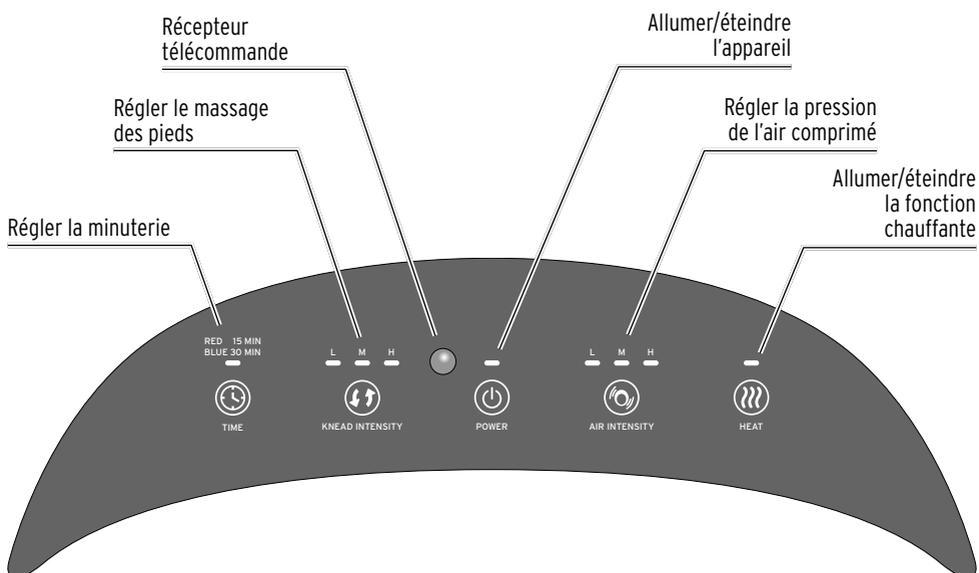


Mise en service




DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Éliminez-le immédiatement.

1. Retirez tout le matériel d'emballage.
2. Retirez le film de protection du panneau de commande.

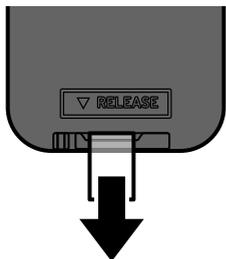

3. Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.

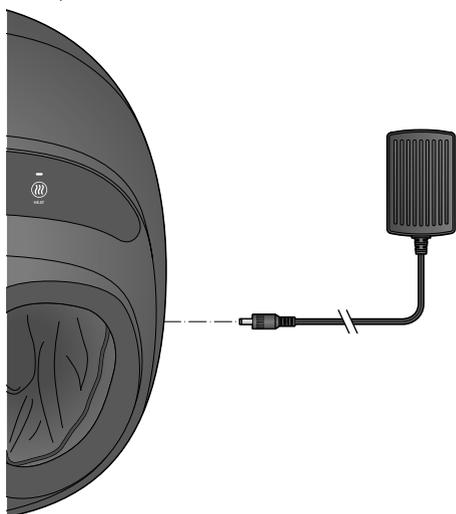

4. Enfoncez la fiche de raccordement du bloc-secteur dans la prise de raccordement de l'appareil de massage.
5. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant aisément accessible.

6. Un signal sonore retentit et le voyant **Power** clignote.

Utilisation

REMARQUE: risque de détérioration

L'appareil est conçu pour une durée de fonctionnement maximum de 30 minutes. Une fois ce temps écoulé, laissez-le refroidir au moins 30 minutes à température ambiante avant de le réutiliser.

1. Asseyez-vous sur une chaise dans une position confortable.
2. Introduisez les pieds entièrement dans les logements de l'appareil prévus à cet effet.
3. Adoptez une posture détendue.

Allumer et éteindre

- ▷ Pour allumer l'appareil, appuyez sur

Un signal sonore retentit et le voyant lumineux **Power** clignote en permanence.

La durée de massage est réglée sur 15 minutes et ce temps s'affiche à l'écran. L'intensité de la fonction de massage des pieds et la pression de l'air comprimé sont réglées sur faibles (L) et la fonction chauffante est enclenchée.

Les voyants correspondants s'allument.

- ▷ Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur .

Un signal sonore retentit, l'appareil s'arrête et tous les voyants s'éteignent.

Régler la minuterie

Au démarrage, la durée de fonctionnement est pré-réglée sur 15 minutes et le voyant correspondant est allumé en rouge.

- ▷ Pour régler la durée de fonctionnement sur 30 minutes, appuyez sur

Le voyant s'allume en bleu.

- ▷ Pour retourner à la durée de fonctionnement de 15 minutes, appuyez à nouveau sur

Si vous n'avez pas arrêté l'appareil prématurément à l'aide de la touche , celui-ci s'éteindra automatiquement une fois la durée de fonctionnement écoulée.

Régler la vitesse du massage de pieds

Au démarrage, la vitesse de la fonction de massage est réglée sur basse (L).

- ▷ Pour modifier la vitesse du massage des pieds, appuyez sur .

La vitesse change suivant la séquence modérée (M) > élevée (H) > éteinte > (L), et ainsi de suite.

Régler la pression de l'air comprimé

Au démarrage, la pression de l'air comprimé est réglée sur faible (L).

- ▷ Pour modifier la pression de l'air comprimé, appuyez sur .

La pression de l'air comprimé change suivant la séquence modérée (M) > élevée (H) > éteinte > (L), et ainsi de suite.

Allumer et éteindre la fonction chauffante

Au démarrage, la fonction chauffante est enclenchée et le voyant  est allumé en permanence.

- ▷ Pour éteindre la fonction chauffante, appuyez sur .

Le voyant  s'éteint.

- ▷ Pour allumer la fonction chauffante, appuyez sur .

Utilisation de la télécommande


Vous pouvez commander toutes les fonctions à l'aide de la télécommande.

- ▷ Dirigez la télécommande en pointant l'émetteur sur le récepteur et appuyez sur la touche correspondante.

-  Allumer et éteindre l'appareil.
-  Régler la minuterie.
-  Régler la vitesse du massage de pieds.
-  Allumer et éteindre la fonction chauffante.
-  Régler la pression de l'air comprimé.

Changer la pile


Lorsque l'appareil ne réagit plus à la télécommande, remplacez la pile.

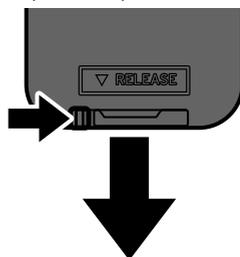


1. Appuyez sur le mécanisme de blocage dans le sens de la flèche et sortez le porte-pile.



Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

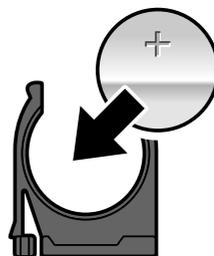

2. Échangez la pile usagée contre une neuve en respectant la bonne polarité (symbole + en haut).

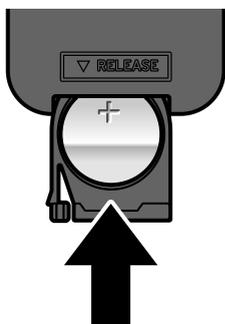

3. Insérez à nouveau le porte-pile jusqu'au fond. Vous devez l'entendre et la sentir s'enclencher.

Nettoyage et rangement



DANGER: risque électrique


- Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'article ainsi que le bloc-secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les doublures doivent être complètement sèches avant d'être réinsérées dans l'appareil de massage des pieds et avant de rebrancher l'appareil sur le secteur.
- N'allumez jamais l'appareil de massage des pieds pour faire sécher la doublure avec la fonction chauffante.

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir quelques minutes.
2. Enlevez les petites taches avec un chiffon ou une éponge humide.

Les doublures peuvent être retirées de leur logement respectif pour être lavées. Pour laver les doublures, procédez comme suit:

3. Ouvrez les fermetures à glissière se trouvant au niveau des logements des pieds.

4. Tirez sur les doublures pour les faire sortir.
5. Lavez les doublures à la main à l'eau tiède avec un peu de lessive pour linge délicat.
6. Laissez les appareils entièrement sécher à l'air libre avant de les ranger. Pour les faire sécher, ne les mettez pas sur le chauffage et ne les passez pas au sèche-linge.

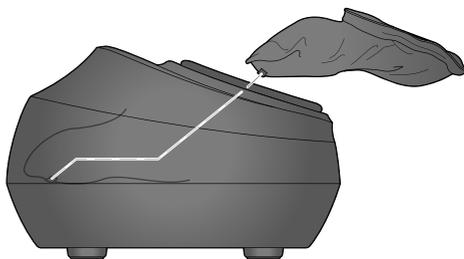

7. Remettez les doublures dans les logements
 8. Les doublures et les logements des pieds sont dotés de pattes auto-agrippantes. Veillez à ce que celles-ci soient bien alignées l'une sur l'autre et refermez les fermetures à glissière.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le bloc-secteur est-il branché à la prise de courant?• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien enfoncée dans la prise de raccordement?
Les têtes de massage tournent très lentement.	<ul style="list-style-type: none">• Vos pieds appuient-ils trop fort sur les têtes de massage? Les pieds doivent simplement reposer dessus, sans pression.
L'appareil s'éteint en cours de fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est en surchauffe. Éteignez l'appareil. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de le rallumer.• L'appareil est-il resté allumé 30 minutes sans interruption? Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes. Laissez refroidir l'appareil à température ambiante.

Caractéristiques techniques

Modèle:	MD-50230B
Référence:	647 030
Piles:	1x CR2025/3 V (Li) Énergie nominale: 0,45 Wh (test selon UN 38.3)
Bloc-secteur:	
Modèle:	IVP1200-2500G
Fabricant:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Classe de protection:	II 
Entrée:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	12.0 V 2.5 30.0 A
	(Le symbole  signifie courant continu)
	(Le symbole  indique la polarité du connecteur)
Efficacité en fonctionnement Ø:	> 86,95%
à faible charge (10%):	> 85%
Puissance absorbée à charge nulle:	< 0,1 W
Classe de protection:	III 
Fonctionnement de courte durée:	30 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Allemagne)



Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole

ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Modèle:

MD-50230B

Fabriqué par:

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Allemagne)