


Gesichtsmassagegerät

de Bedienungsanleitung

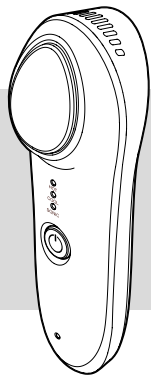

www.tchibo.de/anleitungen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Gesichtsmassagegerät verfügt sowohl über eine Wärme- als auch eine Kältefunktion. Die Sonic-Vibrationsfunktion lässt sich jeweils zuschalten. Die Wärmebehandlung bei 42 °C kann die Blutzirkulation der Gesichtshaut anregen und so die Aufnahme von Pflegeprodukten begünstigen. Die Kältebehandlung bei 6 °C kann die Poren verkleinern, die Gesichtshaut straffen und Fältchen reduzieren. Durch die Sonic-Vibrationsfunktion kann der jeweilige Effekt noch verstärkt werden. Ihre Haut wirkt geschmeidiger, straffer und elastischer. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gesichtsmassagegerät!

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät dient zur Wärme- und Kältebehandlung und zur Massage der Gesichtshaut. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

Benutzen Sie das Gerät nicht ...

- ... bei offenen Wunden, Verbrennungen, Hautreizungen oder Hauterkrankungen,
- ... bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigeminus Neuralgie,
- ... nach einer Operation,
- ... in der Schwangerschaft,
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen,
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache. Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.
- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen unangenehm wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen.

che können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen unangenehm wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen.

- Schon Temperaturen ab 42 °C können zu Verbrennungen führen! Halten Sie das Gesichtsmassagegerät deshalb in der Wärmefunktion nicht zu lange auf einer Stelle.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.



Gefahren durch Elektrizität

- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
- Nicht in der Nähe von Wasser laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose bzw. den USB-Stecker aus der Anschlussbuchse. Lassen Sie Gerät, Anschlusskabel und ggf. den Netzadapter trocknen, bevor Sie das Gerät erneut anschließen.
- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Ladekabel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Ziehen Sie die Schutzfolie von der Massagefläche ab.

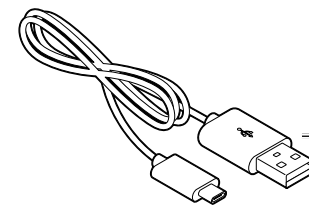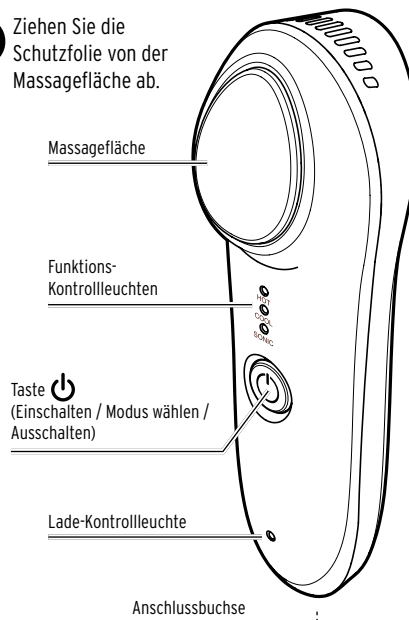

USB-Ladekabel

Weiterer
Lieferumfang
(nicht abgebildet):
Aufbewahrungsbeutel

Zusätzliche Informationen zum eingesetzten Akku:

Hersteller: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China
Marke: LMT
Website: <http://lmtzkj.1688.com>
Email: 335687086@qq.com

Brand-/Explosionsgefahr

- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.

Sachschäden

- Wischen Sie die Massagefläche nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben ab, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. schließen Sie es nicht zum Laden ans Stromnetz an, wenn das Gerät selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am USB-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

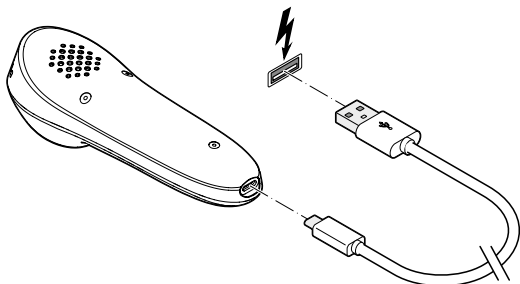

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Gerät und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Der Ladevorgang startet automatisch.

Während des Ladens blinkt die Lade-Kontrollleuchte rot. Laden Sie den Akku nun ca. 2 bis 3 Stunden vollständig auf. Sobald der Akku voll geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte blau.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom Gerät ab. Die Lade-Kontrollleuchte erlischt.

Das Gesichtsmassagegerät ist nun einsatzbereit.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 45 Minuten verwenden. Danach muss der Akku erneut für ca. 2 bis 3 Stunden geladen werden.



- Sie können das Gerät nicht verwenden, während der Akku lädt.
- Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Gebrauch



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Schon Temperaturen ab 42 °C können zu Verbrennungen führen! Halten Sie das Gesichtsmassagegerät in der Wärmefunktion deshalb nicht zu lange auf einer Stelle.




- Wenden Sie das Gesichtsmassagegerät anfangs nur kurz an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten.
- Die Gesichtsbildung sollte 5 Minuten nicht überschreiten. Das Gesichtsmassagegerät schaltet sich nach ca. 2,5 Minuten automatisch aus.
- Verwenden Sie das Gerät maximal 2x am Tag.
- Verwenden Sie die Wärmefunktion bzw. die kombinierte Wärme- und Sonic-Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie

geschminkt sind. Wenn sich Make-up (Foundation, Puder, Concealer etc.) auf der Haut befindet wird dieses durch die Wärme leicht verflüssigt. Die anschließende Wärmebehandlung drückt die Mischung aus Make-up-Partikeln, Talg und Schmutz tief in die nun weit geöffneten Poren. Das Ergebnis sind verstopfte Poren, die zu Mitessern und Pickeln führen können.

- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.

1. Reinigen Sie zunächst Ihre Gesichtshaut gründlich, um jegliches Make-up, Schmutz und überschüssigen Talg zu entfernen. Trocknen Sie das Gesicht anschließend sorgfältig ab.
2. Tragen Sie ein hochwertiges Serum, Gesichtsal oder eine Feuchtigkeitscreme auf. Dies stellt sicher, dass das Gerät sanft über die Haut gleitet und die wertvollen Wirkstoffe effektiv von der Haut aufgenommen werden.

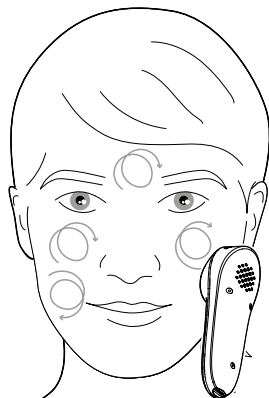

3. Schalten Sie die Wärme- und ggf. zusätzlich die Sonic-Vibrationsfunktion ein (siehe Kapitel „Ein-/Aus-/Umschalten“), je nachdem wie Sie es als angenehm empfinden, und führen Sie die Massagefläche in kreisenden Bewegungen von der Mitte zum Rand Ihres Gesichts.
4. Schalten Sie nun die Kälte- und ggf. zusätzlich die Sonic-Vibrationsfunktion ein und führen Sie die Massagefläche in kreisenden Bewegungen von der Mitte zum Rand Ihres Gesichts.

Anschließend können Sie nach Belieben Make-up auftragen.

Nach dem Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät, insbesondere die Massagefläche, nach jedem Gebrauch gründlich, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Ein-/Aus-/Umschalten



- Die Funktionen lassen sich durch kurzes Drücken der Taste  in der folgenden Reihenfolge einstellen:
Warm -> Warm + Sonic-Vibrationsfunktion ->
Kalt -> Kalt + Sonic-Vibrationsfunktion

Gerät einschalten

Wärmefunktion (42 °C)

Die Wärmebehandlung bei 42 °C kann die Blutzirkulation der Gesichtshaut anregen, die Poren öffnen und die Wirkstoffabsorption steigern.

- Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gesichtsmassagegerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte HOT leuchtet rot. Die Massagefläche ist nach 3 Sekunden warm und einsatzbereit.

Kombinierte Wärme- und Sonic-Vibrationsfunktion

Die Sonic-Vibrationsfunktion massiert und beruhigt die Haut.

- Drücken Sie die Taste  erneut, um zusätzlich zur Wärmefunktion die Sonic-Vibrationsfunktion einzuschalten. Die Kontrollleuchte HOT leuchtet rot, die Kontrollleuchte SONIC leuchtet gelb. Die Massagefläche ist warm und vibriert.

Kältefunktion (6 °C)

Die Kältebehandlung bei 6 °C kann die Poren verkleinern, die Gesichtshaut straffen und Fältchen und Schwellungen reduzieren.

- Drücken Sie die Taste  erneut, um die Kältefunktion einzuschalten. Die Kontrollleuchte COOL leuchtet blau. Die Massagefläche ist nach 3 Sekunden kalt und einsatzbereit.

Kombinierte Kälte- und Sonic-Vibrationsfunktion

- Drücken Sie die Taste  erneut, um zusätzlich zur Kältefunktion die Sonic-Vibrationsfunktion einzuschalten. Die Kontrollleuchte COOL leuchtet blau, die Kontrollleuchte SONIC leuchtet gelb. Die Massagefläche ist kalt und vibriert.

Gerät ausschalten



- Sie können das Gesichtsmassagegerät jederzeit ausschalten, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade eingestellt haben.

- Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gesichtsmassagegerät auszuschalten.

Automatische Abschaltung

Das Gesichtsmassagegerät schaltet sich nach ca. 2,5 Minuten automatisch aus.

Reinigen und Aufbewahren

HINWEIS - Sachschaden

- Das Gesichtsmassagegerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie die Massagefläche mit einem weichen, feuchten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt.
- Wischen Sie das Handteil bei Bedarf ebenfalls mit einem weichen, feuchten Tuch sauber.
- Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- Bewahren Sie das Gerät in dem mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Modell:	717 936
Eingang:	5 V  1 A (das Zeichen  bedeutet Gleichstrom)
Akku:	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V 800 mAh Nennenergie: 2,96 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 2-3 Stunden
Max.Betriebsdauer (bei voll aufgeladenem Akku):	ca. 45 Minuten
Schutzklasse:	III 
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	0,2 W
Netzadapter (nicht beiliegend):	Eingang: AC 100-240 V 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V 1 A
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung. Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.