

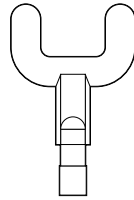


Mini pistolet de massage


fr Mode d'emploi

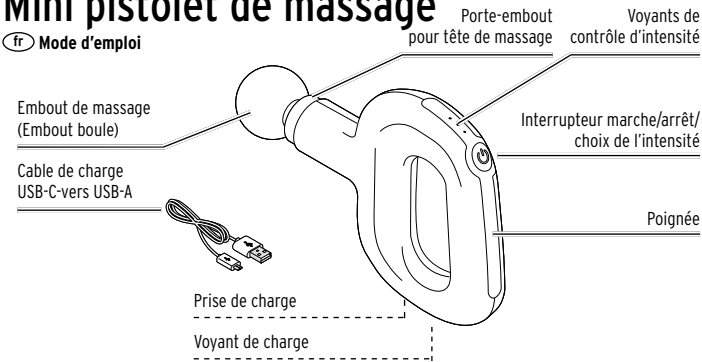


Embout fourche
Pour les groupes musculaires de taille moyenne, par exemple près de la colonne cervicale ou sur les mollets.

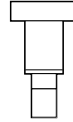


Petit embout plat
Pour les petits groupes de muscles, p. ex. dans la zone épaules-cou.

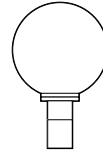


Embout boule
Pour les grands groupes de muscles, p. ex. cuisses ou fessiers.

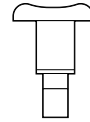

Embout concave
P. ex. pour le massage des cuisses, des mollets ou des bras.

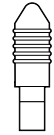

Embout cône
Pour un massage précis, par exemple des points douloureux ou des petites zones musculaires, p. ex. sur les pieds et près des poignets.

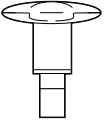

Embout croix
Pour une utilisation générale sur de grands groupes musculaires.

Consignes de sécurité



- Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Le mini pistolet de massage est conçu pour le massage et peut accroître la sensation de bien-être.
- Le mini pistolet de massage est prévu pour un usage privé. Il ne convient pas à une utilisation dans les cliniques, les cabinets de massage, les centres de remise en forme, etc. Le mini pistolet de massage n'est pas un dispositif médical et ne peut pas traiter la douleur.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.
- Utilisez cet article uniquement ...
 - ... pour une utilisation externe sur le corps;
 - ... conformément à la destination pour laquelle il a été conçu et de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risques pour les enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien lorsqu'ils ne sont pas surveillés par un adulte.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

Afin d'éviter les effets négatifs sur la santé, il est formellement déconseillé d'utiliser l'appareil dans les cas suivants:

- N'utilisez pas cet article ...
 - ... en cas de modifications pathologiques de la colonne vertébrale;
 - ... pendant la grossesse.
 - ... en cas de modifications pathologiques ou de blessures dans la zone que vous souhaitez masser (p. ex. contusion, inflammation, plaie ouverte, hernie discale, etc.);
 - ... après la prise de substances limitant les capacités cognitives (p. ex. analgésiques, alcool);
 - ... sur les yeux ou près des yeux, sur le larynx, sur les os ou les articulations, directement sur la colonne vertébrale, au niveau des parties génitales ou des reins ou d'autres parties sensibles du corps;

- ... quand vous êtes au lit;
- ... une demi-heure avant ou après le repas;
- ... sur les animaux;
- ... si l'appareil présente une détérioration visible.

Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, surtout si...

- ... vous souffrez d'une maladie grave ou avez été opéré;
- ... en cas de port d'un stimulateur cardiaque, d'implants ou d'autres dispositifs;
- ... vous avez une tension artérielle anormale ou une forte fièvre;
- ... en cas de thrombose;
- ... en cas de diabète;
- ... en cas de douleurs d'origine inconnue.
- Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 15 minutes; sinon, le massage peut entraîner une stimulation excessive des muscles et, dans certains cas, occasionner des contractures au lieu de vous détendre.
- Si vous ressentez des douleurs ou constatez une éruption cutanée pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le massage et n'utilisez plus cet article.

Respectez les conseils suivants pour une utilisation sans risques:

- N'introduisez aucun objet pointu ou tranchant, par ex. des épingles de sûreté, dans l'article.
- Ne modifiez pas l'article. En cas de dysfonctionnement ou de détérioration, faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.
- Ne laissez jamais l'article sans surveillance lorsqu'il est mis sous tension.

DANGER: risque électrique

- Cet article doit être chargé uniquement dans des locaux secs. Pour charger l'appareil utilisez un adaptateur-secateur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques») et uniquement le câble de recharge USB-C vers USB-A fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Conservez l'article à l'abri de l'humidité, même lorsqu'il n'est pas en charge.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!
- L'article chauffe pendant la procédure de charge. Ne couvrez pas l'article.
- Ne chargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.

- N'exposez pas l'article à des flammes nues, à l'humidité, à des températures élevées, à un rayonnement direct du soleil, etc. Il y a risque de surchauffe, d'explosion et de court-circuit!
- Ne vous servez pas de l'article si l'article ou le câble de recharge USB-C vers USB-A fourni présentent des détériorations visibles.
- N'apportez aucune modification à l'appareil, à l'exception du remplacement des embouts de massage. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- La batterie est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion! Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

PRUDENCE: risque de détérioration et de blessure légères

- Ne mettez pas l'appareil en marche sans embout de massage.
- Tenez les cheveux longs, les chaînes, etc. éloignés de l'appareil pendant son utilisation.
- N'utilisez pas l'article sous une couverture. L'appareil pourrait chauffer.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil. N'y déposez pas non plus d'objets lourds sous peine de l'endommager.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

Modèle:	A004874
Référence:	632 859
Batterie:	lithium-ion 3,7 V  4500 mAh (test selon UN 38.3) (Le symbole  signifie courant continu) Énergie nominale: 16,2 Wh ± 10%
Durée de charge:	env. 3,5 h
Durée de fonctionnement max.:	env. 120 minutes (à vitesse maximum et lorsque la batterie est complètement chargée)
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C


Fabriqué par: Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.




Charger l'appareil

La batterie vous est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

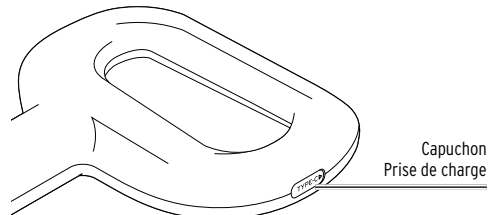

1. Retirez le capuchon de la prise de charge.

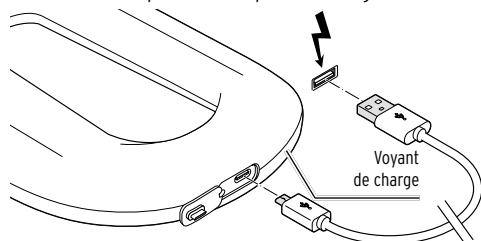

2. Insérez la fiche du câble de charge USB-C vers USB-A fourni dans la prise de charge de l'appareil.

3. Branchez le câble de recharge USB-C vers USB-A sur un adaptateur secteur USB approprié et branchez celui-ci sur une prise de courant. Le voyant de charge intégré s'allume en rouge.

4. La batterie est entièrement chargée lorsque le voyant de charge est vert. Ensuite, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C vers USB-A de la prise de charge.

5. Remettez le bouchon sur la prise de charge.


Temps de charge de la batterie vide: env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement avec une batterie pleine et le réglage de la vitesse la plus élevée: environ 120 minutes.

i Afin de préserver la plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux mois.


C'est à température ambiante normale que la batterie possède la meilleure autonomie.

Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue.

Utilisation

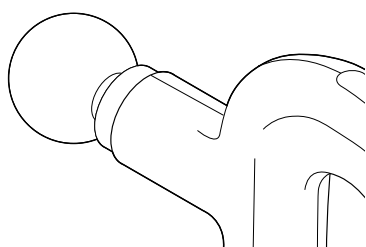

1. Insérez l'embout souhaité dans le porte-embout de l'appareil.

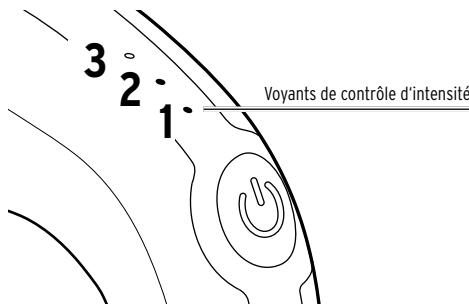

2. Appuyez sur la touche 0,

1x, pour régler l'appareil sur l'intensité de massage la plus faible.

2x, pour une intensité de massage moyenne,

3x, pour une intensité de massage élevée

4x, pour éteindre l'appareil

En fonction de l'intensité de massage réglée, le nombre correspondant de voyants de contrôle d'intensité s'allume (faible = 1, moyen = 2, élevé = 3).

Lorsque vous éteignez l'appareil, tous les voyants de contrôle d'intensité s'éteignent.


3. Déplacez lentement l'embout de massage et, selon l'embout choisi, en effectuant des mouvements circulaires sur la partie du corps à masser



• N'appuyez pas l'appareil trop fort sur la peau.

• Ne laissez jamais l'appareil reposer au même endroit pendant une longue période.

• **N'utilisez pas l'appareil directement sur la colonne vertébrale.** Lorsque vous utilisez l'embout fourche, passez-le sur le dos de manière à ce que les pointes de l'embout se trouvent à côté des vertèbres.

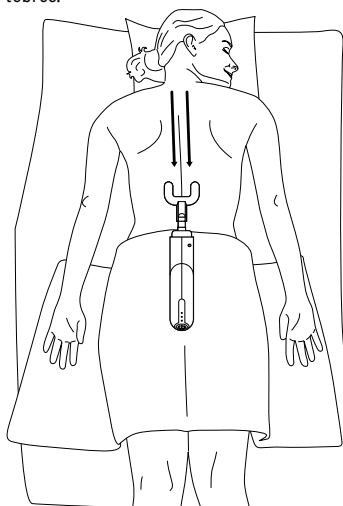

Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 15 minutes. L'appareil de massage s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 minutes.

▷ Retirez l'embout de massage du porte-embout après utilisation.

Entretien

▷ Pour le nettoyage, débranchez l'appareil du réseau et éteignez-le.

▷ Essuyez l'appareil et les embouts avec un chiffon légèrement humide.

▷ Conservez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Problèmes / solutions

L'appareil ne peut pas être allumé.

• Faut-il charger la batterie?

L'appareil ne peut pas être chargé.

• Vérifiez les connexions entre l'appareil, le câble de charge USB-C vers USB-A, l'adaptateur secteur et la prise de courant.

• Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C vers USB-A pendant un moment et réessayez.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier.

Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.